KNÖPFHILFE

UGS: 40022
14.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Griff aus strukturiertem schwarzem Kunststoff
- Drahtlänge: 9,7 cm
- Grifflänge: 12 cm
- Gewicht: 70 g

Categories: 4. Hilfe/Komfort, Zubehör für Hilfe/Komfort

MANUELLE KNÖPFHILFE – VEREINFACHTES KNÖPFEN UND REISSVERSCHLUSS-SCHLIESSEN

Zunächst ermöglicht Ihnen die **manuelle Kings-Knöpfhilfe**, Ihre Knöpfe mit nur einem Handgriff einzuhaken. Anschließend führen Sie das Werkzeug in das Knopfloch ein und ziehen, um Ihr Kleidungsstück mühelos zu schließen.

Außerdem verfügt dieses **Knöpfhilfe-Werkzeug** über einen speziellen Haken für Reißverschlüsse und ist dadurch vielseitig. Schließlich sorgt der rutschfeste Griff für sicheren Halt und eignet sich für Personen mit eingeschränkter Feinmotorik, Seniorinnen und Senioren sowie Kinder.

Hauptmerkmale:


- **Ergonomisch manuell**: strukturierter Griff für festen Halt.
- **Doppelfunktion**: Knöpfe einfädeln und Reißverschlüsse einhaken.
- **Schnelle Anwendung**: eine einzige Bewegung für Knopf oder Reißverschluss.
- **Robuste Konstruktion**: stabiles ABS-Kunststoff für den täglichen Gebrauch.
- **Für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet**: ideal für Seniorinnen und Senioren, Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinder.


Darüber hinaus reduziert dieses **Kings-Knöpfhilfe-Set** Verrenkungen und schont Ihren Rücken. Das kompakte Format passt problemlos in eine Tasche oder Hosentasche.

Bestellen Sie Ihre manuelle Knöpfhilfe jetzt, um Ihre täglichen Handgriffe zu vereinfachen!



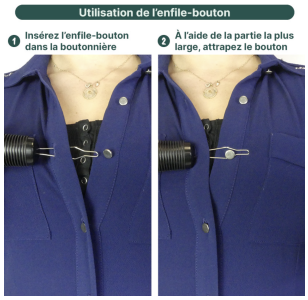


Utilisation de l'enfile-bouton
1 Insérez l'enfile-bouton dans la boutonnière
2 À l'aide de la partie la plus large, attrapez le bouton

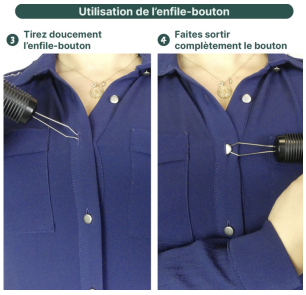
Utilisation de l'enfile-bouton
3 Tirez doucement l'enfile-bouton
4 Faites sortir complètement le bouton